

Come formare il paradenti di protezione doppio da gioco


Avvertenza:

Portare l'acqua a ebollizione, i minori devono ricevere una supervisione costante.




1 Sagomatura del paradenti


- a. Riempire un contenitore idoneo con acqua portata a ebollizione e lasciare raffreddare per **30 secondi**.

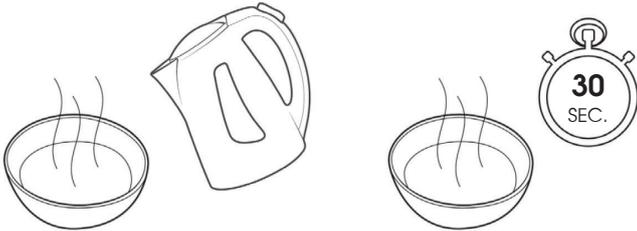

- b. Con il piolo in posizione, mettere il paradenti in acqua per **40 secondi**. **Non superare il tempo indicato**. Rimuovere con un utensile idoneo.

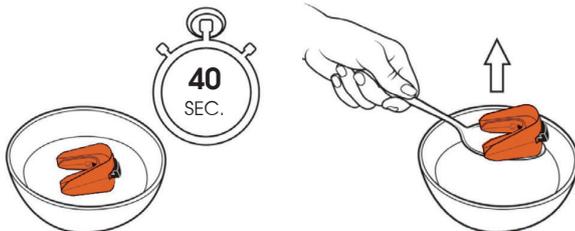


- c. Il paradenti deve sembrare ed essere morbido e pieghevole. Se non è così, rimettere il paradenti in acqua per altri 10 secondi. **Nota:** se l'acqua si è raffreddata troppo, il paradenti non diventerà abbastanza morbido da poter essere modellato; se non è possibile modellarlo, portare di nuovo dell'acqua a ebollizione.

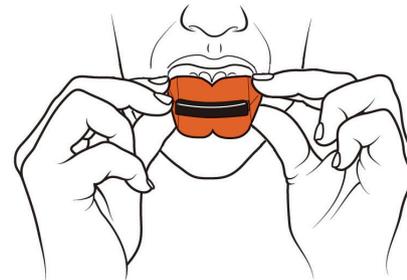

- d. Prima di modellarlo, lasciare che il paradenti si raffreddi a sufficienza. Mettere con attenzione il paradenti attorno ai denti superiori e inferiori, mordere in modo fermo, mentre si aspira con forza, e usare le dita per premere i bordi del paradenti sui denti e sulle gengive. **Continuare questo processo per 30 secondi**.

- e. Rimuovere il paradenti e raffreddarlo sotto acqua corrente fredda per **60 secondi**. Il paradenti deve essere freddo prima di essere messo in bocca.

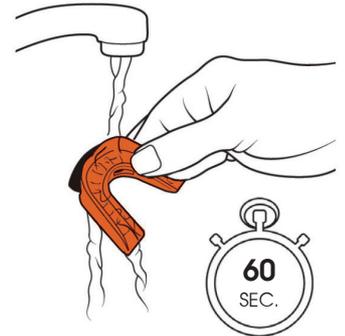

- f. Rimuovere il piolo e mettere il paradenti in bocca. Il paradenti deve essere comodo; se non è così, si possono ripetere i passaggi precedenti.

Se dopo aver modellato di nuovo il paradenti si avverte ancora disagio, non usarlo. Dopo l'uso riposizionare il piolo per tenere le vie aeree formate.

2 Avvertenze importanti

- Non masticare il paradenti.
- Non indossare il paradenti se mostra segni di usura, lesioni o fessure; in questo caso smaltire il paradenti e sostituirlo con uno nuovo.
- Non lasciare che nessuno, se non l'utilizzatore previsto, usi il paradenti.
- Non esporre il paradenti a calore estremo o luce solare diretta, conservare sempre nella confezione quando non è in uso.
- Genitori - controllare la vestibilità del paradenti dei bambini con regolarità per assicurare che non entri in conflitto con lo sviluppo della bocca e dei denti.
- Se si indossa un apparecchio o altro dispositivo per i denti, si consiglia di consultare il dentista o l'ortodontista per valutare l'idoneità del paradenti. Non indossare mai un paradenti con l'apparecchio a meno che non sia stato approvato dalla persona che ha prescritto l'apparecchio.
- I paradenti devono essere usati solo come protezione personale e non devono essere usati per altri scopi, ad esempio protezione antirussamento o dispositivo per evitare di digrignare i denti.

3 Conservazione del paradenti:

- Pulire sempre il paradenti con acqua fredda dopo l'uso. Non utilizzare collutorio, dentifricio o altri detergenti.
- Pulire la scatola del paradenti con acqua calda. Assicurare sempre che il paradenti sia asciutto prima di riporlo nella scatola.
- Tenere sempre il paradenti nella scatola quando non è in uso.
- Scrivere in modo indelebile il nome dell'utilizzatore sulla scatola del paradenti.

Se è necessario restituire il paradenti, assicurarsi che sia restituito nella sua confezione originale, assieme a tutta la documentazione. Ogni paradenti è contrassegnato con il numero di lotto del fabbricante per facilitare la tracciabilità.

I paradenti sono stati testati ai sensi di BSI DD 253:2001 e hanno la conformità CE; una copia del nostro certificato è disponibile per il download dal nostro sito web.

GAME GUARD fa parte di Paul Norman Plastics Limited
Paul Norman Plastics LTD., Unit S5, Inchbrook Trading
Estate, Bath Road, Woodchester, Stroud, Gloucestershire,
GL5 5EY



www.game-guard.co.uk E-mail: enquiries@pnplastics.co.uk Tel: 01453 833 388