

## Formgebung Ihres doppelten Game Guard Mundschutzes:


### Warnung:

Bei kochendem Wasser müssen Minderjährige jederzeit beaufsichtigt werden.



## 1 Formgebung des Mundschutzes


- a. Füllen Sie ein geeignetes Gefäß mit kochendem Wasser und lassen Sie es **30 Sekunden** lang abkühlen.

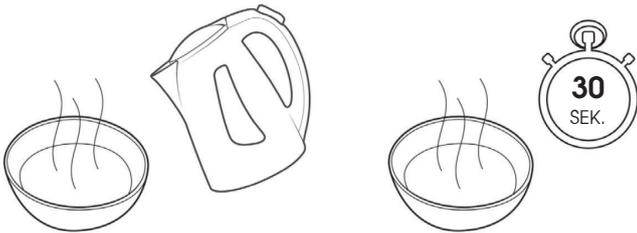

- b. Legen Sie den Mundschutz mit eingesetztem Stöpsel **40 Sekunden** lang in das heiße Wasser. **Überschreiten Sie diese Zeit nicht.** Nehmen Sie den Mundschutz mit einem geeigneten Utensil aus dem Wasser.




- c. Der Mundschutz sollte weich und biegsam aussehen und sich auch so anfühlen. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie den Mundschutz für weitere 10 Sekunden in das heiße Wasser. **Bitte beachten Sie:** Wenn das Wasser zu sehr abgekühlt ist, wird der Mundschutz nicht weich genug, um formbar zu sein. Beginnen Sie in diesem Fall ggfs. erneut mit kochendem Wasser.

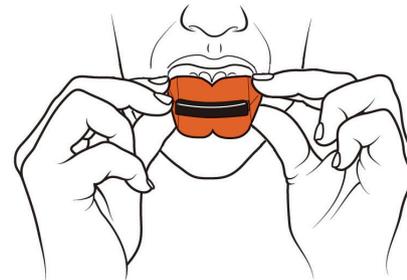

- d. Lassen Sie den Mundschutz vor dem Formen auf eine erträgliche Temperatur abkühlen. Legen Sie den Mundschutz vorsichtig um die oberen und unteren Zähne herum und beißen Sie fest zu, während Sie ihn kräftig ansaugen, und drücken Sie die Ränder des Mundschutzes mit den Fingern gegen Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch. **Setzen Sie diesen Vorgang 30 Sekunden lang fort.**

- e. Entfernen Sie den Mundschutz und kühlen Sie ihn unter fließendem kaltem Wasser **60 Sekunden** lang ab. Der Mundschutz muss kalt sein, bevor er wieder in den Mund gesetzt wird.

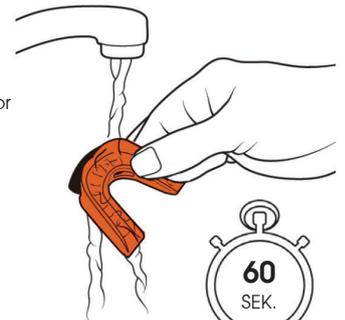

- f. Entfernen Sie den Stöpsel und setzen Sie den Mundschutz in den Mund. Der Mundschutz sollte sich angenehm anfühlen. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie ggfs. die oben genannten Schritte.

**Wenn der Mundschutz nach Wiederholung des Formungsvorgangs immer noch nicht passt, verwenden Sie ihn nicht. Setzen Sie den Stöpsel nach dem Gebrauch wieder ein, um die Form der Atemwege beizubehalten.**

## 2 Wichtige Warnhinweise

- Kauen Sie nicht auf Ihrem Mundschutz herum.
- Tragen Sie Ihren Mundschutz nicht, wenn dieser Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder Sprüngen aufweist. Entsorgen Sie in diesem Fall bitte Ihren Mundschutz und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Erlauben Sie keiner anderen Person als dem genannten Benutzer, den Mundschutz zu tragen.
- Setzen Sie den Mundschutz nicht extremer Hitze oder direktem Sonnenlicht aus und bewahren Sie ihn bei Nichtgebrauch immer in seinem Behältnis auf.
- Eltern – Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Mundschutzes Ihres Kindes, um sicherzustellen, dass dieser die Entwicklung von Mund und Zähnen nicht behindert.
- Wenn Sie eine Zahnspange oder eine andere Vorrichtung an Ihren Zähnen tragen, sollten Sie Ihren Zahnarzt oder Kieferorthopäden konsultieren, um die Eignung des Mundschutzes zu prüfen. Tragen Sie niemals einen Mundschutz mit einer Zahnspange, es sei denn, dieser wurde von der Person, die die Zahnspange anpasst, genehmigt.
- Der Mundschutz darf nur als persönliche Schutzausrüstung und nicht für andere Zwecke verwendet werden, wie z. B. als Schnarchschutz oder zur Verhinderung von Zähneknirschen.

## 3 Aufbewahrung Ihres Mundschutzes

- Reinigen Sie Ihren Mundschutz nach jedem Gebrauch mit kaltem Wasser. Verwenden Sie keine Mundspülungen, Zahnpasta oder andere Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Mundschutzbehältnis mit warmem Wasser. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Mundschutz trocken ist, bevor Sie diesen in seinem Behältnis aufbewahren.
- Bewahren Sie Ihren Mundschutz immer in seinem Behältnis auf, wenn er nicht benutzt wird.
- Schreiben Sie den Namen des Benutzers mit einem wasserfesten Stift auf das Mundschutzbehältnis.

Falls Sie den Mundschutz zurückgeben müssen, stellen Sie bitte sicher, dass dieser in der Originalverpackung und mit allen Unterlagen zurückgegeben wird. Jedes Mundschutzbehältnis ist mit der Chargennummer des Herstellers gekennzeichnet, um die Rückverfolgung zu erleichtern.

**Die Mundschutze wurden gemäß BSI DD 253:2001 getestet und sind vollständig CE-konform. Eine Kopie unseres Zertifikats können Sie von unserer Website herunterladen.**