

## Sposób formowania podwójnego ochraniacza na zęby Game Guard:


### Ostrzeżenie:

Procedura obejmuje użycie wrzącej wody. Należy nadzorować osoby nieletnie.



### 1 Formowanie ochraniacza na zęby

- a. Napełnij odpowiedni pojemnik wrzącą wodą i zostaw ją do ostygnięcia na **30 sekund**.

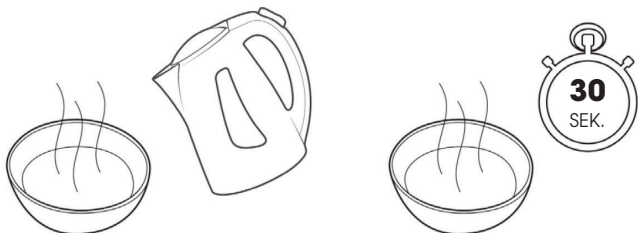

- b. Włóż ochraniacz z zatyczką do gorącej wody na **40 sekund**. **Nie przekraczaj tego czasu.** Wyjmij z wody, używając łyżki.




- c. Ochraniacz powinien być miękki i giętki. Jeżeli tak nie jest, ponownie włóż ochraniacz do wody na kolejne 10 sekund. **Uwaga:** jeżeli woda ostygła zbyt mocno, ochraniacz nie zmięknie wystarczająco, aby można go było formować. Ponów procedurę, używając świeżo zagotowanej wody.



- d. Przed formowaniem poczekaj, aż ochraniacz ostygnie do odpowiedniego poziomu. Ostrożnie włóż ochraniacz na górne i dolne zęby, a następnie zaciśnij szczękę, równocześnie mocno wciągając powietrze. Palcami dociskaj krawędzie ochraniacza do zębów i dziąseł. **Kontynuuj te czynności przez 30 sekund.**

- e. Wyjmij ochraniacz i chłódź go pod bieżącą wodą przez **60 sekund**. Ochraniacz powinien być zimny podczas wkładania do ust.

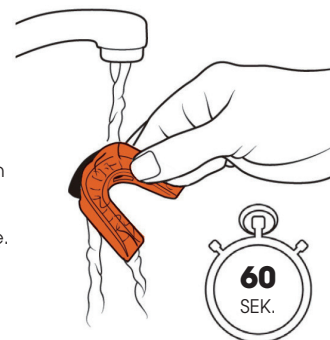

- f. Wyjmij zatyczkę i włóż ochraniacz do ust. Nie powinien sprawiać dyskomfortu. W przeciwnym razie można powtórzyć powyższą procedurę.

**Jeżeli po powtórzeniu procedury formowania nadal występuje dyskomfort, nie używaj ochraniacza. Po użyciu włóż zatyczkę, aby zapobiec zamknięciu kanałów do oddychania.**

### 2 Ważne ostrzeżenia

- Nie żuć ochraniacza.
- Nie wkładać ochraniacza, jeżeli zauważalne są ślady zużycia, pęknięcia lub rozerwania. W takim przypadku wyrzucić ochraniacz i wymienić go na nowy.
- Ochraniacz powinien być używany wyłącznie przez jedną osobę.
- Nie narażać ochraniacza na skrajnie wysokie temperatury lub bezpośrednio promienie słoneczne. Zawsze przechowywać go w pudełku, gdy nie jest używany.
- Rodzice: regularnie sprawdzać dopasowanie ochraniacza do zębów dziecka, aby nie przeszkadzał we wzroście szczęki i zębów.
- Jeżeli na zębach jest aparat ortodontyczny lub inne urządzenie medyczne, zaleca się zasięgnięcie porady stomatologa lub ortodonty, czy można używać ochraniacza. Nigdy nie zakładać ochraniacza na aparat ortodontyczny, o ile nie zostało to wykonane za zgodą stomatologa zakładającego ten aparat.
- Ochraniacze służą jedynie do ochrony zębów i nie należy ich używać do innych celów, np. aparatu zabezpieczającego przed chrapaniem lub urządzenia zapobiegającego zgrzytaniu zębami.

### 3 Przechowywanie ochraniacza na zęby

- Po każdym użyciu zawsze czyścić ochraniacz zimną wodą. Nie używać płynów do płukania ust, pasty do zębów ani innych środków czystości.
- Pojemnik na ochraniacz czyścić ciepłą wodą. Przed włożeniem ochraniacza do pojemnika upewnić się, że jest suchy.
- Zawsze przechowywać ochraniacz w pojemniku, gdy nie jest używany.
- Zapisać pisakiem niezmywalnym imię i nazwisko użytkownika na pojemniku na ochraniacz.

Jeżeli zachodzi potrzeba zwrócenia ochraniacza, należy zwrócić go w oryginalnym opakowaniu wraz z całą dokumentacją. Każdy pojemnik na ochraniacz jest oznaczony numerem partii producenta, aby ułatwić jego śledzenie.

**Ochraniacze zostały przetestowane zgodnie z wymogami normy BSI DD 253:2001 i są w pełni zgodne z wymogami oznaczenia CE. Kopię certyfikatu można pobrać z naszej witryny.**